

全方位細胞解凍儀 CR-200

解凍形式不受限，透過精準控溫
及震動擺臂確保解凍過程
快速、精準以及標準化

解凍形式
彈性選擇


管式
1~59 管
袋式
25~250 mL

乾淨安全
有保障

內建
UV 燈
滅菌功能

標準化操作
數據可追溯

自訂
解凍參數
數據
自動儲存

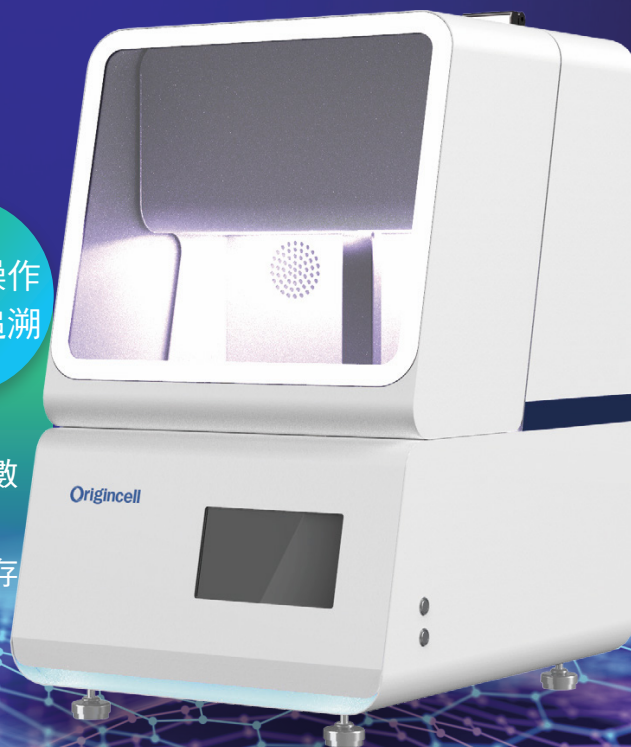

Origincell
原能生物

全方位細胞解凍儀

CR-200

CR-200 儀器特性

- 超廣角可掀式防護窗，可觀察解凍過程
- 單次最多可同時解凍 **59** 管凍管 (1~5 mL 皆適用)，也可解凍凍袋 (25、100、250 mL)
- 可自動注水 / 排水，依照參數設定自動增溫，精準可控制
- 多樣化參數設定，自訂參數後可儲存成常用參數，最多可儲存 **99** 組
- 操作簡單，觸控式螢幕，內建語音提示
- 即時記錄並儲存解凍數據，數據可輸出或上傳
- 內有 **UV** 燈滅菌功能，清潔有保障

CR-200 儀器規格

尺寸	440(W) x 570(D) x 720(H) mm
重量	≤ 50 Kg
電源	AC 220V/50HZ/8A 搭配 110V 加壓器
水溫設定範圍	常溫 ~50°C
擺盪盤轉速	10~250 CPM
下降深度	0~70 mm
最大解凍量	凍管：59 管 (1~5 mL 皆適用) 凍袋：~250 mL

