

CURIOSIS

FACSCOPE™ B

全自動細胞計數器

FACECOPE B 為韓國 **CURIOSIS** 公司研發製造生產

細胞利用 **trypan blue** 染色後，以專屬玻片送入機器內，**20** 秒即可快速得到
細胞濃度、大小及存活率等相關資訊。

一次測定
4 個樣品

20 秒
OK!



C-Slide



☎ 0800-211-819

f YouTube Unimed 騰達行

🌐 www.unimed.com.tw

台北 02-2720-2215 新竹 03-6684-586 台中 04-2463-3591 嘉義 05-2844-162 台南 06-2890-665 高雄 07-3470-143 花蓮 03-8573-757

U/A/UV100507



FACSCOPE™ B

實機操作畫面


全自動定位

全自動XYZ平台定位，
對焦擷取細胞影像。



快速呈現結果

清楚顯示細胞數量、濃度及存活率。

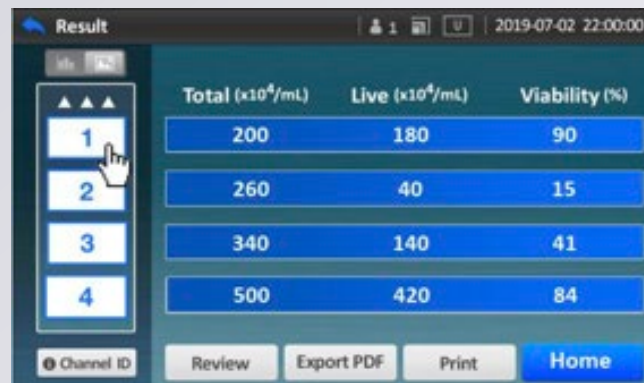

Gating 功能

細胞大小 Gating 功能，
調整偵測範圍，優化計數結果。



智能計算


智能算法精確識別細胞
團塊/不規則細胞形態。



FACSCOPE™ B

可符合生技公司、GTP Lab、細胞治療實驗室操作規範

- ✓ 儀器 IQ/OQ
- ✓ 每日儀器 QC 確效
(Standard Slide)
- ✓ 儲存不同細胞計數條件
- ✓ 一鍵輸出 PDF 計數報告
- ✓ 提供耗材 COA

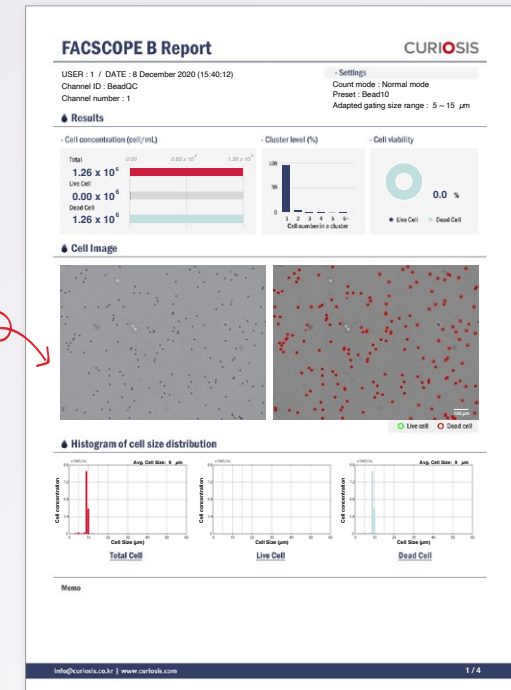

FACSCOPE™ B 專用

C-Slide 一次性細胞計數板

- 每片擁有四個檢測通道
- 通道刻有 Neubauer Improved (NI) 網格，也可用於手動計數
- 單片獨立包裝，50 片 / 盒，200Test
- 檢測體積：20 µL

